

**Vielen Dank, dass Sie sich für Fontafit Tavi, entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig.**

## Verpackungsinhalt

Smarte Armbanduhr | Ladeschale | Bedienungsanleitung

## Übersicht

1. Armband mit Schnellverschluss
2. Gehäuse
3. 1,22" TFT Display
4. Berührungsempfindliche-Taste
5. Sensoren
6. Ladeanschluss



## Inbetriebnahme

### Aufladen

Fontafit Tavi ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer Akku ausgestattet. Laden Sie das Fontafit Tavi vor der ersten Inbetriebnahme auf. Setzen Sie das Tavi in die Ladeschale, sodass die Pins der Ladeschale und des Tavi Kontakt haben (Abb. 1). Schließen Sie die Ladeschale. Das Tavi kann mit jedem USB-A Ladegerät oder dem USB-A-Port eines Computers verbunden werden.

Stecken Sie das USB Kabel in eine USB-Stromquelle ein; es erscheint auf dem Display ein Akku Zeichen; der Akku wird geladen. Die Ladezeit beträgt je nach Batterieladestadium ca. 1-2 Stunden. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist wechselt das Symbol von orange auf grün.

**Hinweis:** Das Armband kann mit gängigen 20 mm Bändern mit Federsteg getauscht werden.

### Ein-/Aussschalten

**Zum Einschalten**, drücken und halten Sie für ca. 10 Sekunden die Taste (4); Fontafit Tavi schaltet sich ein.

**Zum Ausschalten**, tippen Sie auf die Taste (4) bis die Uhrzeit angezeigt wird; drücken und halten Sie dann die Taste (4) zwei Mal für ca. 3 Sekunden. Es erscheint das Info Menü gefolgt vom Ausschalt-/Reset-Menü. Tippen Sie auf die Taste (4) zum Auswählen des Menüpunkts „Ausschalten“ und drücken und halten Sie die Taste (4) erneut für ca. 3 Sekunden um die Auswahl zu bestätigen und das Fontafit Tavi auszuschalten.

### Display Anzeige

Fontafit Tavi verfügt über ein Farbdisplay. Über das Display können Datum, Uhrzeit, Verbindung zum Smartphone, gelaufene Schritte, Schlafdauer, Puls, Blutdruck, Blutsauerstoff, Wetter und Benachrichtigungen angezeigt werden.

**Achtung:** Datum und Uhrzeit werden erst nach der Verbindung mit dem Smartphone aktualisiert. Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich. Benachrichtigungen mit Emojis werden nicht unterstützt.

### Individualisierung des Zifferblatts


Das Zifferblatt 1 können Sie mit einem Foto Ihrer Wahl individualisieren.

1. Wählen Sie in der App den Menüpunkt „Zifferblätter“ und gehen Sie auf „Bearbeiten“.
2. Gehen Sie auf „Bild wählen“, wählen Sie Ihr Bild aus und definieren Sie den Ausschnitt.
3. Passen Sie bei Bedarf die Farbe, Position und weitere Einstellungen an.
4. Klicken Sie auf Speichern und warten Sie, bis das Bild auf dem Tavi hochgeladen wurde. Dieser Vorgang dauert ca. 90 Sekunden.

Es stehen drei verschiedene Zifferblätter zur Verfügung. Diese können über die App ausgewählt werden.

### Aktivieren der Untermenüpunkte

Beim Tippen auf die Taste (4), erscheinen die Hauptmenüpunkte.

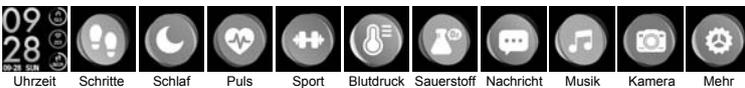

Durch langes Drücken der Taste (4) für ca. 3 Sekunden aktivieren Sie das Untermenü (falls vorhanden). Durch langes Drücken der Taste (4) für ca. 3 Sekunden im Untermenü bestätigen Sie eine Auswahl oder gelangen zurück zum Hauptmenü.

### Schrittzähler

Hier werden die Anzahl der Schritte, Kalorien sowie die zurückgelegte Distanz angezeigt.

### Schlafdauer

Hier wird die ermittelte Schlafdauer angezeigt wenn Sie das Fontafit Tavi während des Schlafens tragen. Weitere Daten werden Ihnen in der App angezeigt.

### Pulsmessung

Hier wird die Pulsmessung durch langes Drücken der Taste (4) gestartet.

### Blutdruckmessung

Hier wird die Blutdruckmessung durch langes Drücken der Taste (4) gestartet.

### Messung der Sauerstoffsättigung

Hier wird die Messung der Sauerstoffsättigung durch langes Drücken der Taste (4) gestartet.

**Bitte beachten:** Tragen Sie das Armband ca. 1cm oberhalb Ihres Handgelenkknochens und achten Sie darauf das es dicht an Ihrer Haut anliegt.

Die Messqualität kann u.a. durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

Geringe Durchblutung • Tätowierungen • Rückartige Bewegungen • Auftragen von Cremes • verschmutzte Sensoren.


**Hinweis:** Durch die optoelektronische Pulsmessung (Photoplethysmographie) bei der Ihr Blutfluss durch grüne LEDs und Fotodioden erfasst wird, zeigt das Fontafit auch Werte an wenn das Armband zu locker oder nicht getragen wird. Achten Sie daher für die Pulsmessung auf den richtigen Sitz des Armbands.

**Dies ist kein medizinisches Gerät: Daten der Schrittzähler- und Puls, Blutdruck- und Sauerstoffsättigung-Funktion sind nicht zur medizinischen Verwendung geeignet.**

## Sport

In Menü Sport sind einige Aktivitäten vorprogrammiert. Sie gelangen in das Untermenü indem Sie die Taste (4) lange gedrückt halten. Dort können Sie zwischen Gehen, Laufen, Fahrrad, Seilspringen, Federball, Basketball, Fußball, Schwimmen auswählen und durch langes Drücken der Taste (4) aktivieren.

Im Sportmodus wird die dynamische Herzfrequenzmessung aktiviert. Laufende Aktivitäten können Sie durch langes Drücken der Taste (4) beenden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

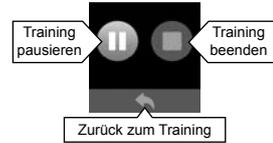

## Benachrichtigungen und ankommende Telefonate

Benachrichtigungen oder ankommende Anrufe zeigt das Fontafit Tavi direkt an.

Im Menü können Sie durch langes Drücken der Taste (4) die letzten 3 Benachrichtigungen anzeigen lassen.

## Weitere Menüpunkte

Ist Ihr Fontafit Tavi mit Ihrem Smartphone verbunden und in Reichweite, stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

- Aktuelles Wetter und 1-Tages Wettervorhersage
- Bilder auslösen
- Musik steuern

Diese aktivieren Sie im Hauptmenü durch langes Drücken der Taste (4).

## Installation der App

Downloaden und installieren Sie die „Fontafit Pro“-App durch Scannen des QR-Codes oder folgen Sie dem Link: (URL: [www.d-parts.de/app/fontafit\\_pro](http://www.d-parts.de/app/fontafit_pro))



**Hinweis:** Die Android App setzt Android 4.4 oder höher voraus. Die iOS App setzt iOS 9 oder höher voraus.

## Verbindung und Nutzung der App

Schalten Sie das Fontafit Tavi ein, aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone und starten Sie die App. Geben Sie in der App zunächst Ihre Daten wie Ihr Geschlecht, Größe, Gewicht und Geburtsjahr ein.

**Hinweis:** Diese Daten dienen dazu den Kalorienverbrauch und die Distanz korrekt zu berechnen. Gehen Sie auf „HINZUFÜGEN“ um das Fontafit Tavi mit dem Smartphone zu verbinden.

Nach erfolgreicher Verbindung, werden Datum, Uhrzeit und Wetterdaten vom Smartphone auf das Fontafit Tavi übertragen.

## Folgende Funktionen können durch die App aktiviert werden:

- Zifferblatt: Hier können Sie zwischen drei Zifferblättern wählen die auf dem Fontafit Tavi angezeigt werden.
- Benachrichtigungen: Hier stellen Sie ein, welche Benachrichtigungen auf dem Fontafit Tavi angezeigt werden.
- Wecker: Hier können Sie bis zu 3 Wecker stellen. Das Fontafit Tavi wird vibrieren wenn der Wecker klingelt.
- Fotoauslöser: Hier kann das Fontafit Tavi als Fotoauslöser der Kamera Ihres Smartphones verwendet werden.
- Erinnerung: Aktivieren Sie diese Funktion, wird das Fontafit Tavi Sie jede Stunde durch vibrieren erinnern. Sie können die Erinnerungsfunktion nutzen um aufzustehen, zu laufen, trinken etc.
- Nicht stören: Hier können Sie die Zeit einstellen in der keine Benachrichtigungen an das Fontafit Tavi gesendet werden.
- Ganztägige Herzfrequenz: Ist die Funktion aktiviert, misst das Tavi Ihre Herzfrequenz automatisch alle 30 Minuten.

Weitere Informationen zu Schritten, Schlaf, Puls, Blutdruck, Blutsauerstoff, Sportaktivitäten und die Routenaufzeichnung werden durch Antippen des jeweiligen Menüs angezeigt in der App angezeigt.

**Hinweis:** Die Routenaufzeichnung erfordert Aktivierung der GPS-Funktion des Smartphones.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter [support.fontastic.eu](mailto:support.fontastic.eu).

## Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Das Gerät ist wasserabweisend, nicht wasserdicht.
- Weitere Informationen zur Wasserbeständigkeit finden Sie auf unserer Website [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de).
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

## Technische Daten

- Übertragung: Bluetooth® 4.0
- Batterietyp: Lithium polymer
- Display: 1,22" TFT Display
- Betriebstemperatur: -10° - +40° C
- Material Armband: Silikon
- Schutzklasse: IP68 Schutz bei dauerndem Untertauchen bis zu 30 Minuten lang in 1.5 Meter Tiefe.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53EG.

## Hinweis zum Umweltschutz

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

**Thank you for purchasing the FontaFit Tavi. Please read the operating instruction carefully and follow the instructions and tips to get the most out of your Fitness Bracelet.**

## Package content

Smart Bracelet | Charging cradle | Manual

## Overview

1. Bracelet with quick release
2. Housing
3. 1.22" TFT Display
4. Touch sensitive button
5. Sensors
6. Charging connection



## Getting started

### Charging the battery

The FontaFit Tavi is equipped with a rechargeable Lithium-Polymer battery. Fully charge the FontaFit Tavi prior to putting the device into operation for the first time. For this purpose, please use attached charger. Place the Tavi in the charger cradle where the pins of the charger cradle and the Tavi are in contact (Fig.1). Close the charger cradle. The charging cradle can be charged with any USB-A power source or the USB-A port of a Computer. Connect the USB cable to a USB power source; the battery symbol will show up and the battery will be charged. The usual charging time is 1-2 hours. As soon as the battery is fully charged, the icon will show a green Battery.

**Note:** The bracelet can be exchanged with common 20 mm bracelets with spring bar.

### Switching the device on and off

**To switch it on,** press and hold the button (4) for about 10 seconds. The FontaFit Tavi will switch on. **To power it off,** tap the button (4) until the time is displayed; then press and hold the button (4) twice for about 3 seconds. The info menu appears followed by the power off/reset menu. Tap on the button (4) to select the menu entry „Off“ and press and hold the button (4) again for about 3 seconds to confirm your selection and power off the FontaFit Tavi.

### Display

The FontaFit Tavi has a built-in LCD color display. The Date, Time, connection to the phone, walked steps, sleep duration, heart rate, blood pressure, blood oxygen, weather, push messages are shown on the display.

**Attention:** Date and time will only be updated after connecting to the smartphone. Manual configuration is not possible. Notification with emojis are not supported.

### Watch face individualization


You can customize the watch face 1 with a photo of your choice.

1. Select the menu item „Watch faces“ in the app and go to „Edit“.
2. Go to „Select picture“, select your picture and define the section.
3. Adjust the colour, position and other settings as required.
4. Click on Save and wait until the image has been uploaded to the tavi. This process takes about 90 seconds.

Three different watch faces are available. These can be selected via the app.

### Enter submenu

Tap the button (4) to display the main menu items.

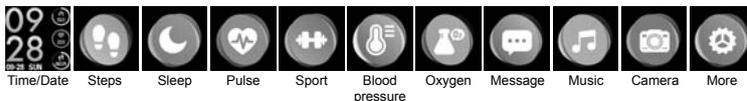

Press and hold the button (4) for approx. 3 seconds to activate the submenu (if available). Press and hold the button (4) for approx. 3 seconds in the submenu to confirm a selection or return to the main menu.

### Step count

The step count burned calories and distance are displayed.

### Sleep duration

The determined sleep duration is displayed here if you wear the FontaFit Tavi while sleeping. Further data will be displayed in the app.

### Pulse measurement

The pulse measurement is started here by press and holding the key (4).

### Blood pressure measurement

The blood pressure measurement is started here by pressing and holding button (4).

### Measurement of oxygen saturation

The measurement of oxygen saturation is started here by pressing and holding key (4).


**Please note:** Wear the bracelet approx. 1cm above your wrist bone and make sure it is close to your skin. Please note that other factors can lead to measurement inaccuracies: Low blood circulation • Tattoos • Uneven or jerky movements • Sunscreen and other lotions • dirty sensor.

**Note:** By using optoelectronic pulse measurement (photoplethysmography), in which your blood flow is detected by green LEDs and photo diodes, FontaFit also displays values when the bracelet is worn too loosely or not worn at all. For this reason, make sure that the wristband fits correctly when measuring your heart rate.

**This is not a medical device: Data from the Step, pulse, blood pressure and oxygen saturation functions are not intended to be used for medical purposes.**

## Sport

Some activities are pre-programmed in the Sports menu. To enter the submenu, press and the hold button (4). Here you can choose between Walking, Running, Cycling, Skipping, Badminton, Basketball, Soccer, Swimming. Activate them by pressing and holding the button (4). Dynamic heart rate measurement is activated in sport mode. You can end current activities by pressing and holding the button (4). Confirm your selection.

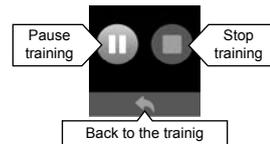

## Notifications and incoming phone calls

The FontaFit Tavi displays notifications or incoming calls directly. In the menu, you can display the last 3 notifications by pressing and holding the button (4).

## Other menu items

If your FontaFit Tavi is connected to your smartphone and within range, the following menu items are available:

- Current weather and 1-day weather forecast
- camera remote control
- control music.

This can be activated in the main menu by pressing and holding the button (4).

## Installing the app

Download and install the „FontaFit Pro“ app by scanning the QR code or follow the link:(URL: [www.d-parts.de/app/fontafit\\_pro](http://www.d-parts.de/app/fontafit_pro))



**Note:** The Android app requires Android 4.4 or later. The iOS app requires iOS 9 or later.

## Establishing a Bluetooth® connection and using the app

Switch on FontaFit Tavi, enable Bluetooth® on your smartphone and start the app. First enter your data in the app, such as your gender, height, weight and year of birth.

**Note:** This data is used to correctly calculate calorie consumption and distance.

Go to „ADD DEVICE“ to connect the FontaFit Tavi to your smartphone. After successful connection, date, time and weather data are transferred from the smartphone to the FontaFit Tavi.

## The following functions can be activated by the app:

- Watch face: Here you can choose between three watch faces which are displayed on the FontaFit Tavi.
- Notifications: Here you set which notifications are displayed on the FontaFit Tavi.
- Alarm clock: Here you can set up to 3 alarm clocks. The FontaFit Tavi will vibrate when the alarm clock rings.
- Photo Shutter: Here you can use the FontaFit Tavi as a photo shutter for the camera of your smartphone.
- Reminder: If you activate this function, the FontaFit Tavi will remind you every hour by vibrating. You can use the reminder function to get up, walk, drink, etc.
- Do not disturb: here you can set the time at which no notifications are sent to the FontaFit Tavi.
- Full-time Heart Rate: When enabled, Tavi automatically measures your heart rate every 30 minutes.“

For more information on steps, sleep, pulse, blood pressure, oxygen, sport activities and route recording, tap the appropriate menu in the app.

**Note:** The route recording requires activation of the GPS function of the smartphone.

If you need technical support, please contact our support team by our website under [support.fontastic.eu](http://support.fontastic.eu).

## Safety advice:

- Do not open the device
- The device is water-resistant, not waterproof. Further information on water resistance can be found on our website [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de).
- Do not use the device when it has visible defects.

## Technical Data

- Connection: Bluetooth® 4.0
- Battery type: Lithium polymer
- Display: 1.22" TFT color Display
- Working temperature: -10° - +40° C
- Material Bracelet: Silicone
- IP68 protection for continuous immersion up to 30 minutes in 1.5 meter depth

## Registration and Safety

**CE** Certification/General Information  
We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53/EC.

## Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.